


SISCEL

Sistema de Controle de Exames Laboratoriais

Manual de instalação do SISCEL Versão: 2015

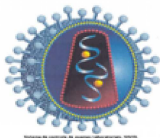

Secretaria de
Vigilância em Saúde

Ministério
da Saúde



Instalação e Configuração do SISCEL

Sumário

Observações gerais.....	3
Instalação automática do SISCEL.....	4
Instalando o Private Wire Client	5
Instalando o PowerBuilder Dployment.....	7
Instalando o Sybase Open Client.....	8
Instalando o Sybase Open Client e aparecendo ERRO	10
Instalando o Sybase Open Client Completo	11
Correção do Arquivo PBRTF050.DLL.....	15
Verificando se o Private Wire Client está ativo	17
Executando o SISCEL.....	18

Instalação e Configuração do SISCEL

Observações gerais

Antes de darmos prosseguimento às instruções para a instalação é necessário verificar se o microcomputador onde será instalado o Sistema de Controle de Exames Laboratoriais - SISCEL possui os requisitos necessários.

Instalar o driver para a impressora conectada ao microcomputador.

Antes de iniciar a instalação, realize a instalação do drive da impressora caso não o possua instalado.

Acesso à Internet.

Se o local onde está realizando a instalação possuir suporte de informática, entre em contato com ele, dependendo das dificuldades que possam surgir neste item.

Conexão por meio da rede local

Se for usada rede, estando ou não configurada, procurar o administrador da rede local ou setor de informática.

***** Importante *****

1. O SISCEL conecta ao banco de dados através das portas 5000-5004 do endereço IP siscel.aids.gov.br ou 189.28.129.162. Forneça essa informação para o administrador da rede local ou setor de informática;
2. É necessário que a rede permita que os pacotes de dados que trafeguem entre o microcomputador e o servidor do Departamento de DST e Aids e Hepatites Virais, não sofram alteração de seu conteúdo e cabeçalho;

Instalação e Configuração do SISCEL


Instalação automática do SISCEL

É aconselhável instalar como Administrador do micro.

Dê um duplo clique no arquivo **SiscellInstW7** ou **SiscellInstWP**.

A pasta C:\SiscellInstXP ou C:\SiscellInstW7 é criada automaticamente.

Antes de iniciar a instalação do SISCEL feche todos os aplicativos abertos.

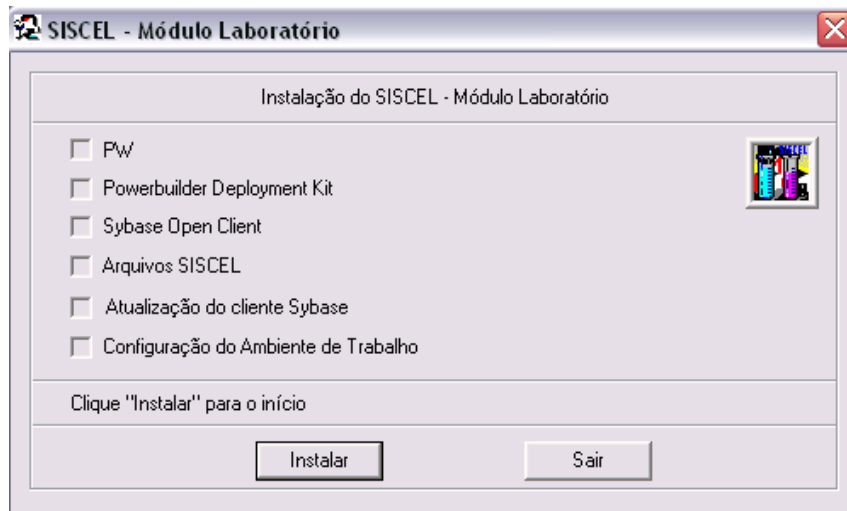

Clique em  .

Na medida em que as instalações forem sendo concluídas, automaticamente ficam marcadas.

Instalação e Configuração do SISCEL


Instalando o Private Wire Client

Nesse momento o aplicativo irá iniciar a instalação do Private Wire Client. Este aplicativo tem instalação obrigatória.

Nota: *Não reinicie o computador após a instalação do Private Wire Client.*



Clique em .

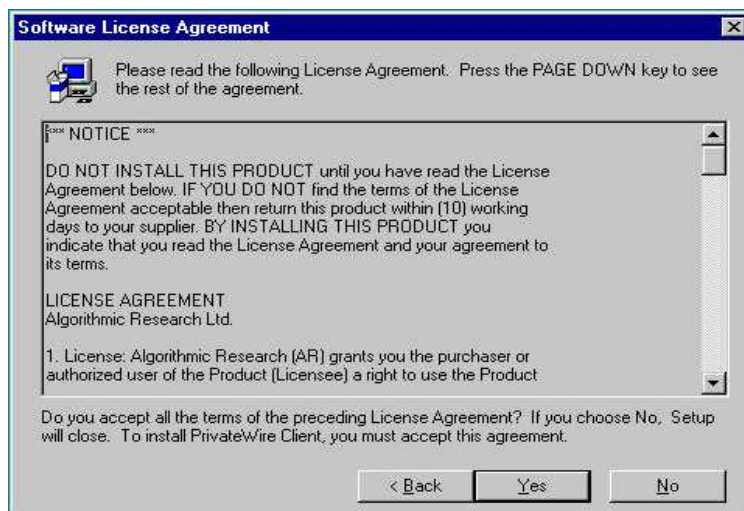


Clique em .

Instalação e Configuração do SISCEL



Clique em .

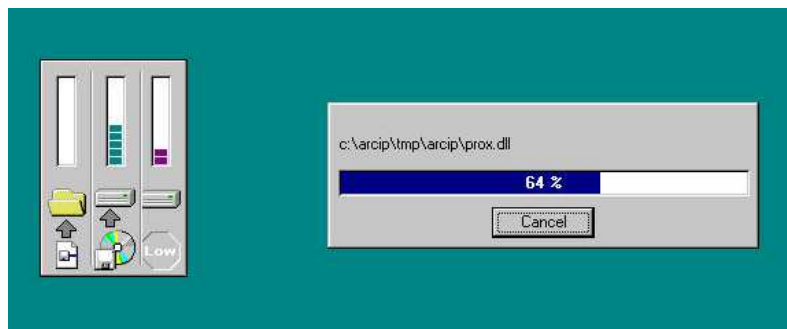


Clique em .

Agora você deverá modificar a seleção feita pelo aplicativo, e marcar a opção que **NÃO** deseja reinicializar o Windows neste momento.

Instalação e Configuração do SISCEL

Clique em , para finalizar a instalação do Private Wire Client.

Se a instalação do Private Wire Cliente foi concluída com sucesso, clique em

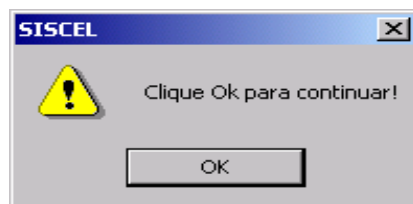

Instalado o PowerBuilder Deployment


Surgirá a seguinte tela.



Instalação e Configuração do SISCEL

Instalando o Sybase Open Client


Nota: *Não reinicie o computador após a instalação do SyBase Open Client.*

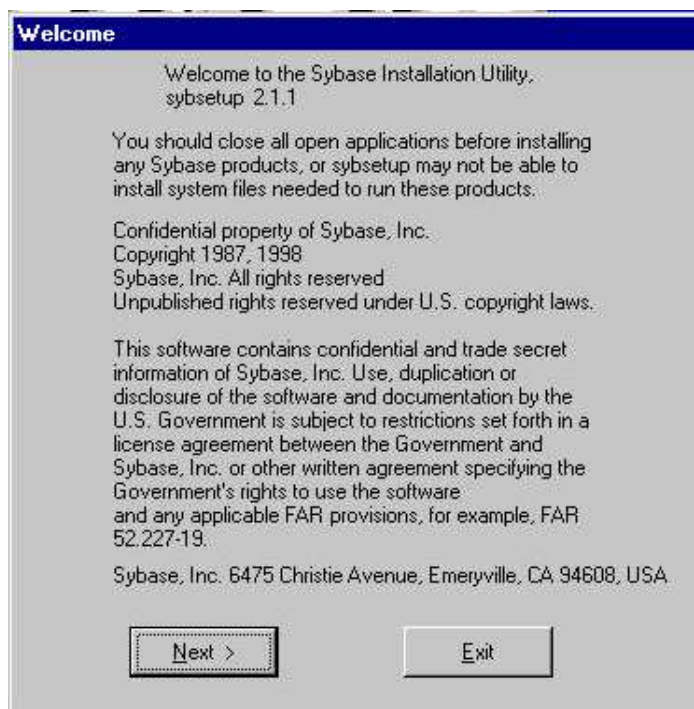

Clique em .

Na próxima janela, marque a opção  e prossiga.

A seguir, mantenha o diretório para a instalação e prossiga, pressionando .

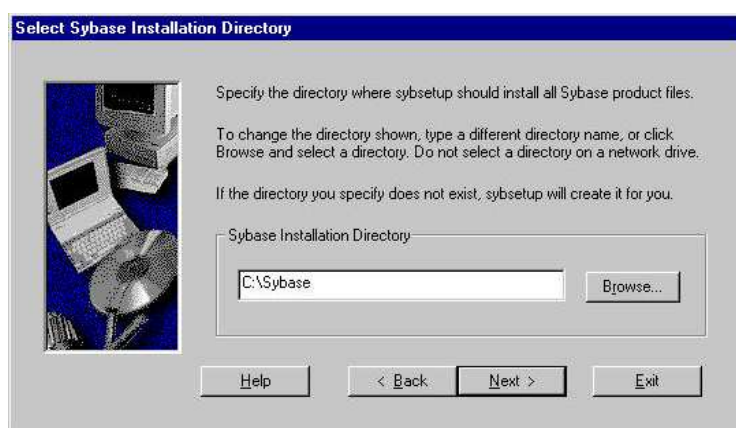


Pressione .


Instalação e Configuração do SISCEL



Pressione 

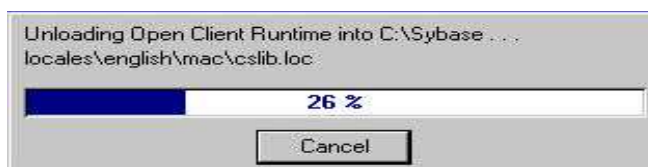


Ao terminar surgirá a seguinte mensagem:

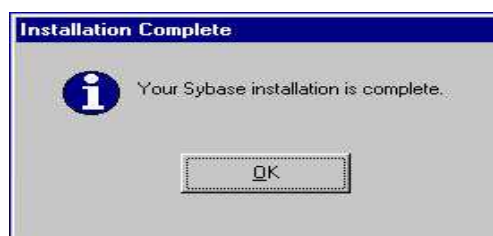

*** Lembre-se de não reiniciar o computador.**

Ao finalizar a instalação do Sybase, o aplicativo retornará para a seguinte tela.

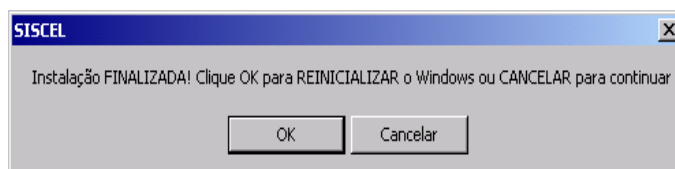

Ao clicar em  o sistema finalizará a instalação e reiniciará seu computador.



Final da Instalação

Siga as instruções contidas na tela acima. Caso o microcomputador não seja reiniciado automaticamente, reinicie o computador para que todas as alterações sejam reconhecidas pelo Microsoft Windows.

Instalação e Configuração do SISCEL

Instalando o Sybase Open Client e aparecendo Erro

Caso durante a instalação do Sybase ocorra o erro abaixo, faça o seguinte procedimento.

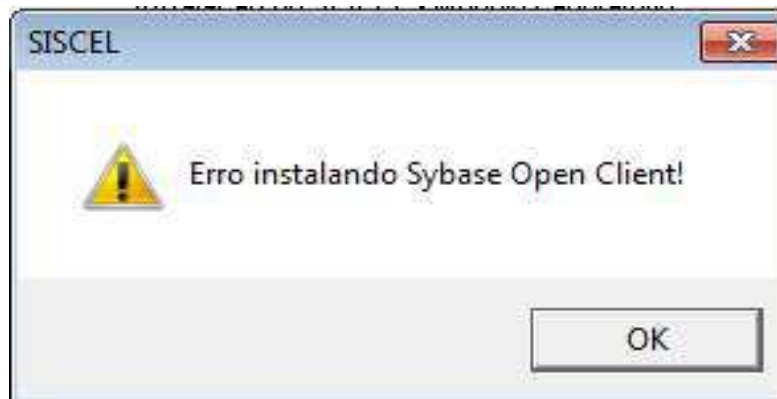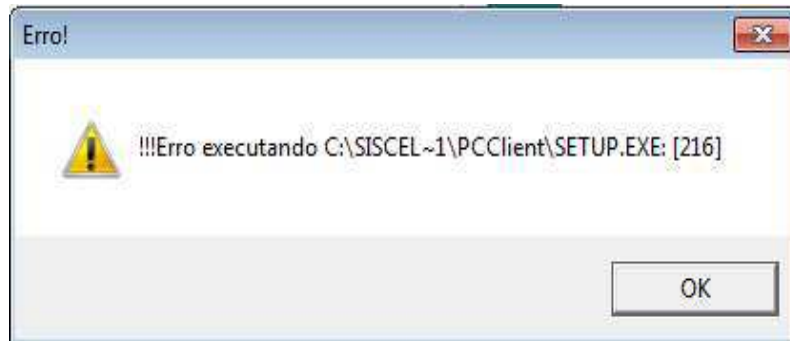


Instalação e Configuração do SISCEL

INSTALANDO SYBASE

Vá até a pasta C:\SISCELInstW7\PCClientCompleto;

Execute o arquivo **Setup.Exe**;

Após carregar o Install Shield, clique no botão **Avançar**;

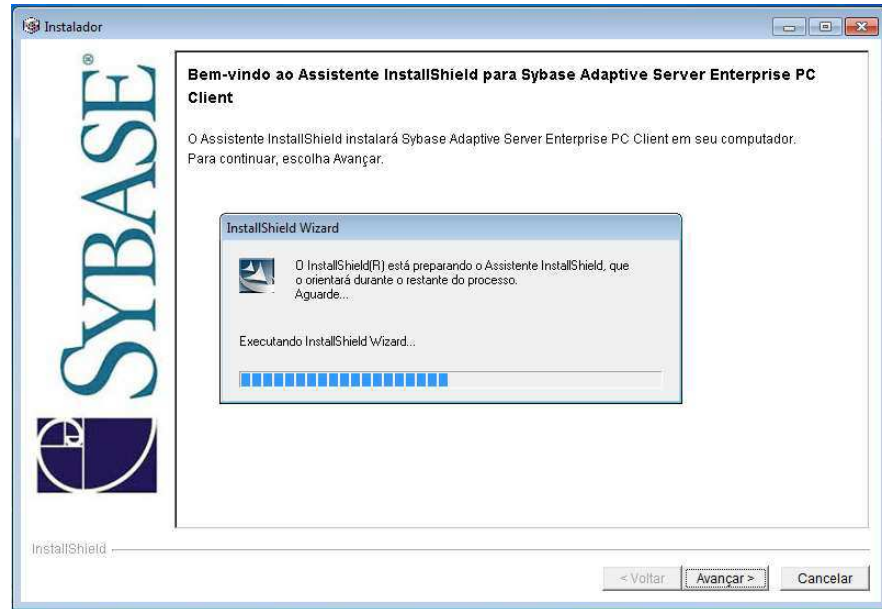


Selecione o idioma desejado (**Brazil**), em seguida selecione a opção **I agree**;




Na próxima janela clique no botão **Avançar**, mantendo o Destino de instalação como demonstrado abaixo.

Instalação e Configuração do SISCEL


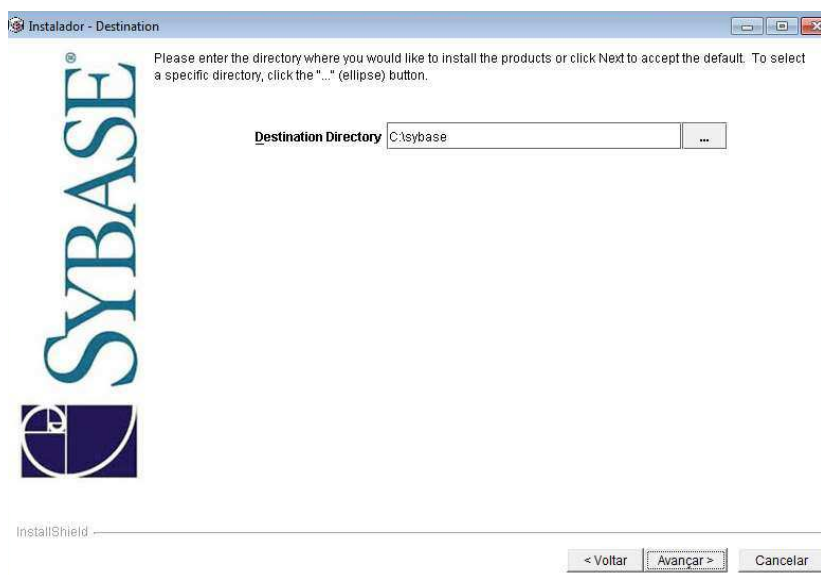


Destination Directory C:\sybase

Quando for perguntado se deseja criar a pasta clique em **Sim**.

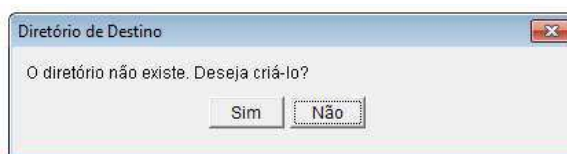


Na janela seguinte clique sobre a opção Personalizar.

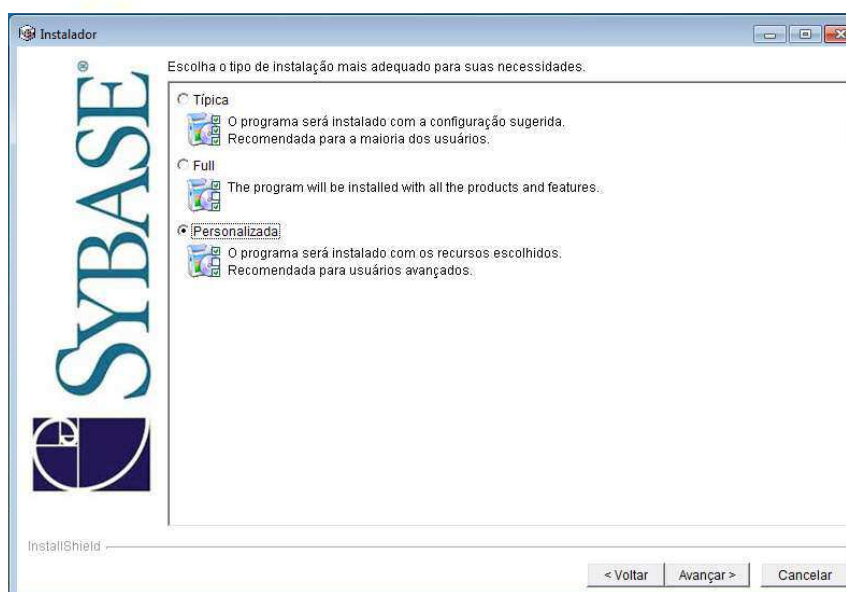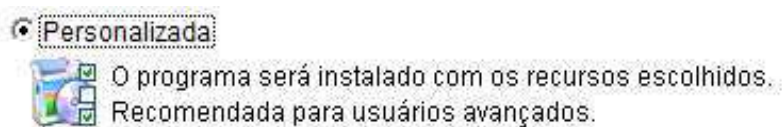


Instalação e Configuração do SISCEL

Marque a Opção ODBC e OLEDB.

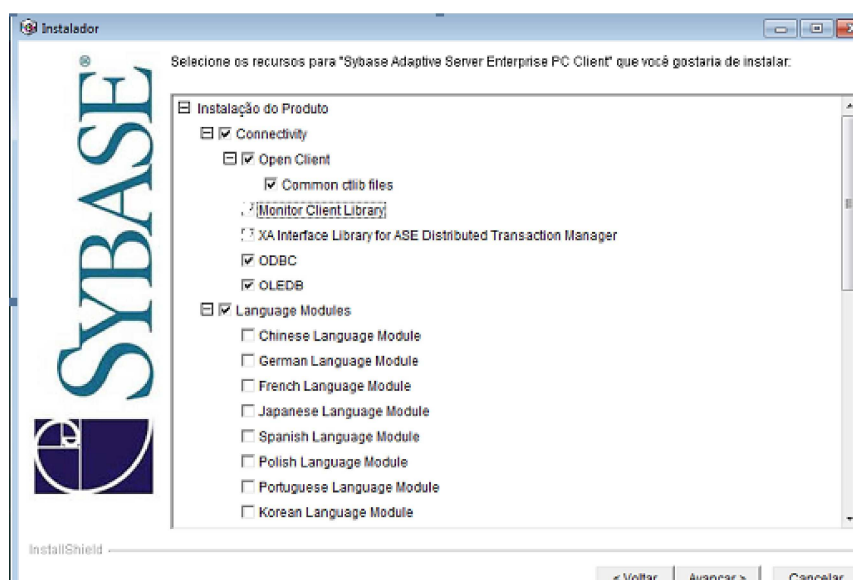


Desmarque as opções das caixas de checagem que estão grifadas em vermelho em seguida clique em **Avançar**.

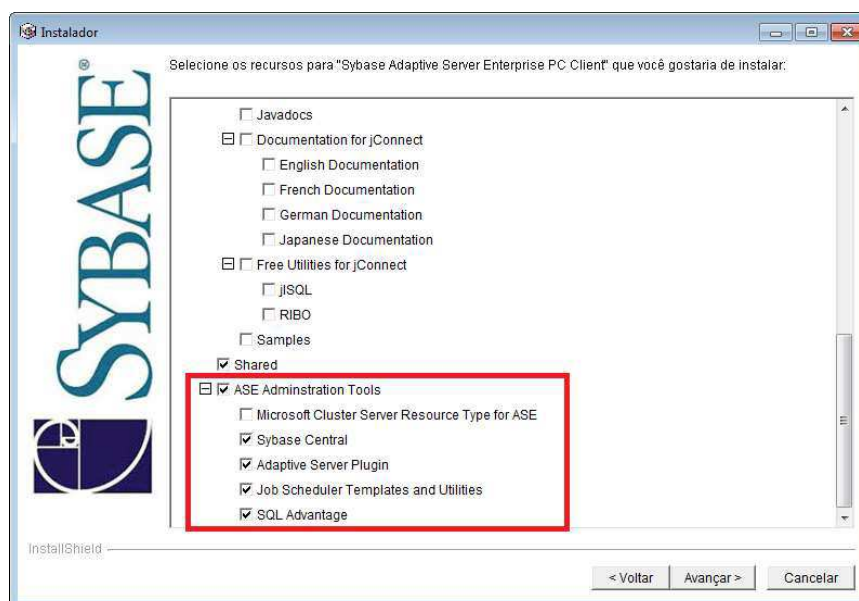



- ASE Administration Tools
 - Microsoft Cluster Server Resource Type for ASE
 - Sybase Central
 - Adaptive Server Plugin
 - Job Scheduler Templates and Utilities
 - SQL Advantage

Instalação e Configuração do SISCEL

1. Confirme se a sua instalação está como demonstrado na janela abaixo.

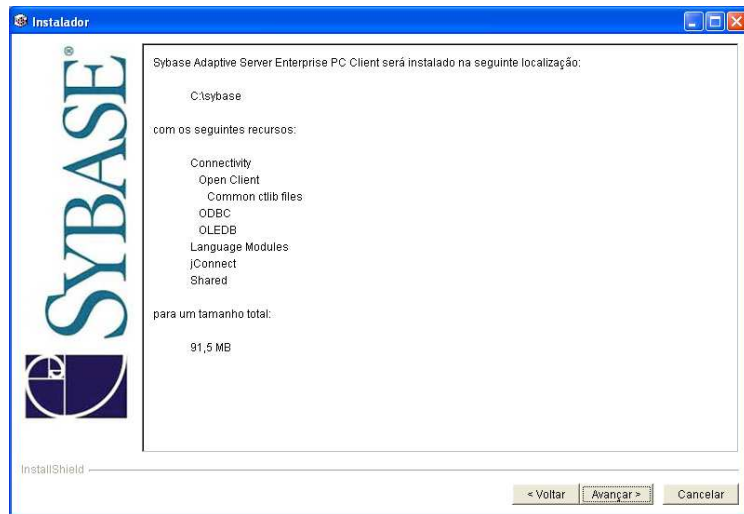

2. Aguarde a instalação e a confirmação de instalação do sistema.

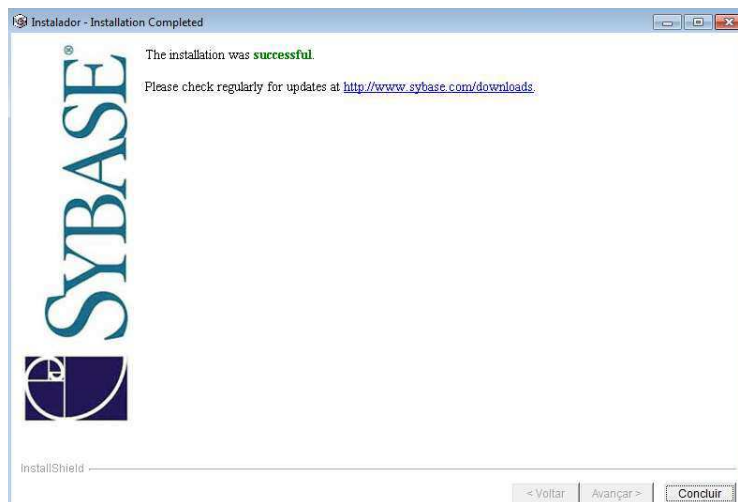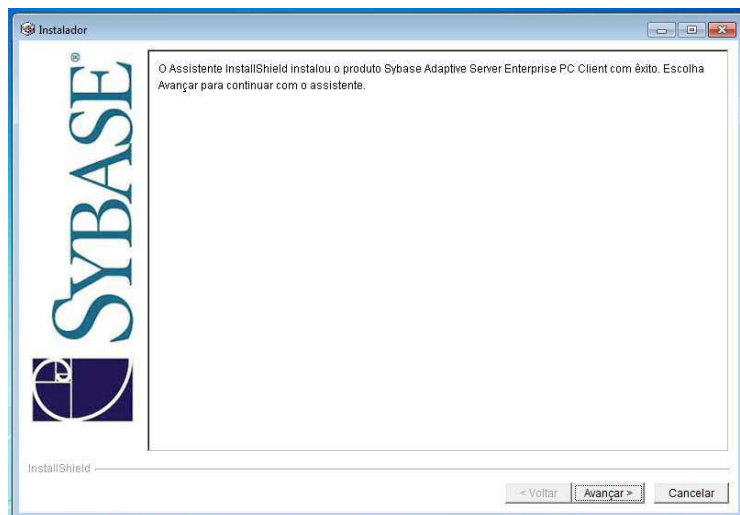


Reinicie o computador

Instalação e Configuração do SISCEL

CORREÇÃO ARQUIVO PBRTF050. DLL


Obs.: se ao executar o sistema for exibido à mensagem abaixo, algumas configurações será necessárias para o funcionamento o sistema, então faça as configurações necessárias antes de utilizar o sistema.

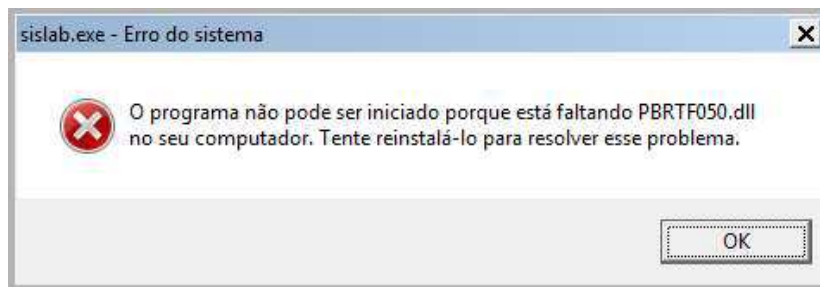

Para correção do erro acima, faça a seguinte alteração:


Na área de trabalho clique com o lado direito do mouse em **Meu Computador** e selecione propriedades.

Ao abrir a janela clique sobre a opção **Alterar Configurações**.

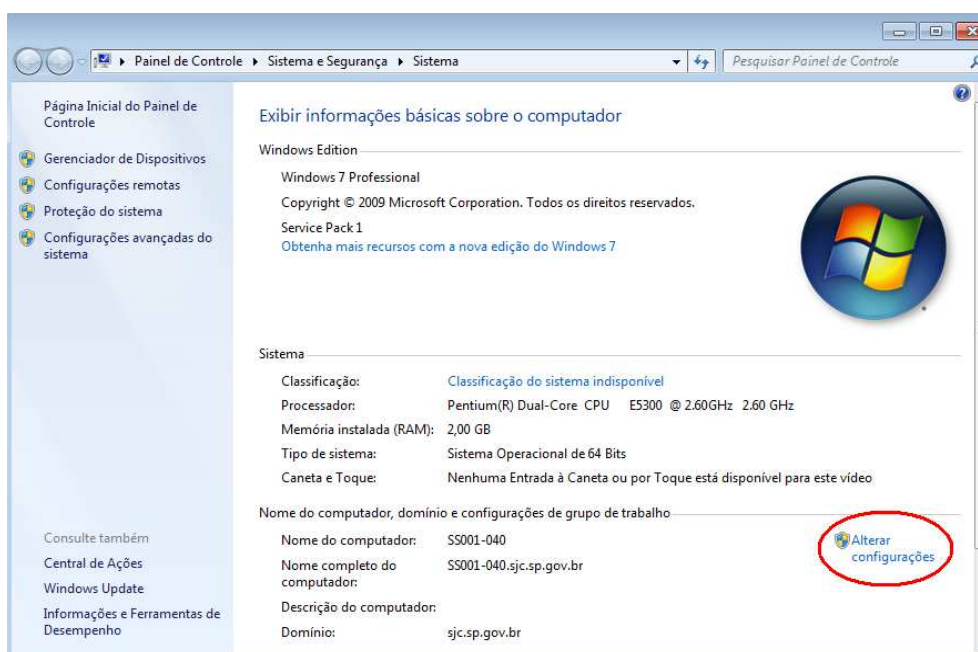


Instalação e Configuração do SISCEL

Clique na guia Avançados selecione Variáveis de ambiente.

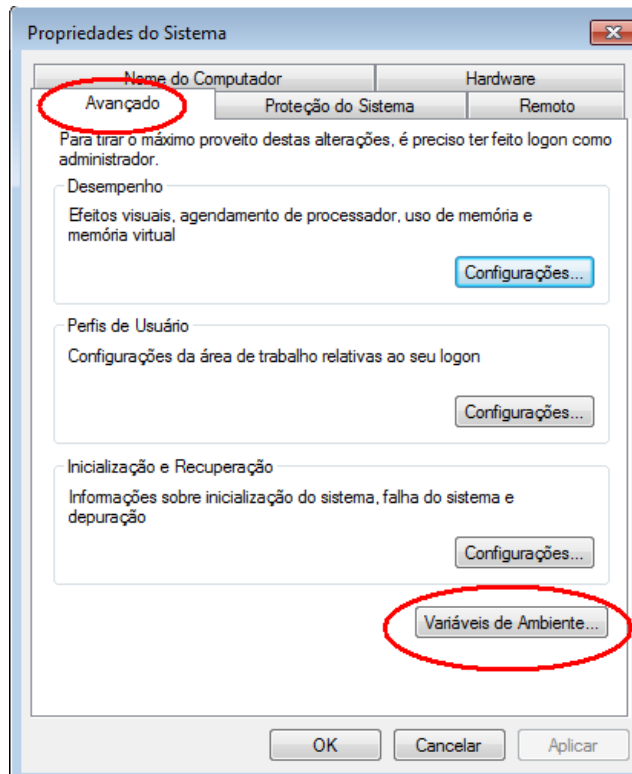


Procure a variável **PATH** na caixa abaixo, selecione-a e clique em editar.

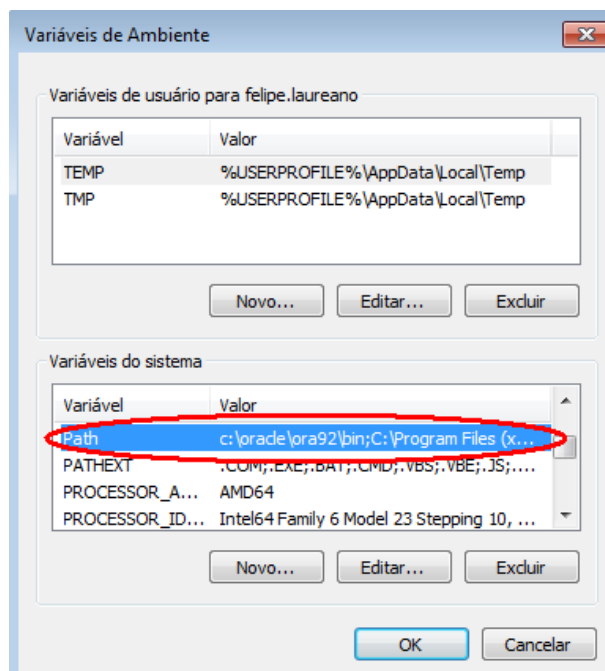

Não apague nada nesta janela, depois do último ponto e vírgula (;) ou da última palavra digite (;c:\pwr\pb5i32dk;) Após essa alteração reinicie o computador.

Instalação e Configuração do SISCEL

VERIFICANDO SE O PRIVATE WIRE CLIENT ESTÁ ATIVO

O aplicativo chamado de Private Wire (PW)  é responsável pela criptografia de todas as informações que são compartilhadas entre o micro, onde está instalado o aplicativo do SISCEL, e o banco de dados em Brasília. A criptografia consiste em alterar as informações trocadas por meio de um algoritmo. Com isso caso alguém capture algum trecho de informação, este não consiga entender o que foi escrito. Poderíamos comparar com uma linha cruzada de telefone provocada intencionalmente. Com a criptografia a pessoa que provocou a linha cruzada e escuta a conversa de terceiros, não conseguiria entender o que é conversado.

Esta segurança não impede que a informação seja capturada por terceiros, somente dificulta a sua compreensão.

Uma maneira fácil de identificar se o PW está ativo é através da constatação do desenho de uma chave perto do relógio do Windows na barra de tarefas.

Se não existir é porque o PW não está ativo. Para ativá-lo, Feche o SISCEL (caso este esteja aberto), e vá à barra de tarefas e clique com o botão esquerdo do mouse em **iniciar, programas** e clique no **Private Wire Client** que ele será ativado automaticamente, logo após, você poderá entrar no SISCEL.

ORIENTAÇÃO DE ACESSO

Para ter acesso ao SISCEL após sua instalação é necessário que você tenha o cartão do SISCEL, caso não possua o cartão, entrar em contato com suporte do Departamento de DST e Aids e Hepatites Virais.

Para a criação da identificação de acesso e senha, o contato deve ser feito pelo endereço de e-mail siscel@ aids.gov.br ou ainda pelo telefone 0800 612439 opção 2, ou (61)3315-7611 e (61)3315-7695. Solicitamos que seja informado o nome completo, número do CPF e nome do laboratório e as permissões de acesso.


Instalação e Configuração do SISCEL

EXECUTANDO O SISTEMA SISCEL

- 1) Execute o sistema **SISCEL** pelo atalho na área de trabalho.



- 2) Será aberta a seguinte janela

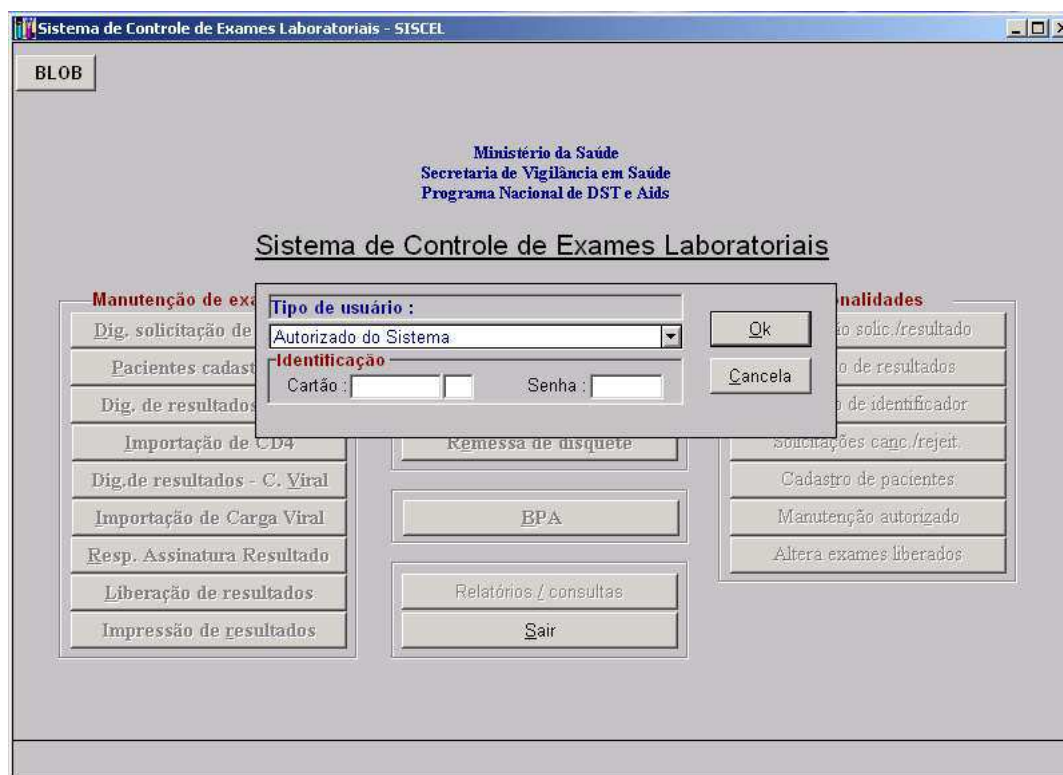

- 3) Para o teste selecione em **Tipo de usuário**, a opção **Usuário de instalação**.
- 4) Digite o número de cartão de teste, (**00017146-00**) e senha (**123456**).
- 5) Se exibir a mensagem abaixo sistema esta ok e pronto para uso.

